

Analiza moczu



URYXXON® Relax

- Wygodny i łatwy w obsłudze - komfort pracy
- Uproszczone wprowadzanie i odczyt danych
- Nowoczesny, niezawodny i funkcjonalny

po prostu **RELAKS**

MACHEREY-NAGEL



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce
ELAB, ul. Lipowa 9, 05-500 Mysiadło
tel 022 7110947 fax 022 7014363
elab@elabmed.pl www.elabmed.pl


Badanie moczu w małych i średnich laboratoriach analitycznych oraz w gabinetach lekarskich

Aparat URYXXON Relax umożliwia przeprowadzenie szybkiej i wiarygodnej analizy moczu, co przyspiesza właściwą diagnozę lekarską w przypadku chorób nerek, cukrzycy lub infekcji dróg moczowych. Eliminuje błędy odczytu manualnego i umożliwia uzyskanie wydruku analizy moczu ograniczając ryzyko pomyłki przy ręcznym wypisywaniu wyniku.

Zastosowanie:

Aparat URYXXON Relax przeznaczony jest do odczytu 10 parametrycznych testów paskowych URYXXON Stick 10 posiadających pole kompensacyjne barwy moczu oraz eliminujące wpływ witaminy C na wyniki badań. Wyniki badań są prezentowane na ekranie dotykowym oraz drukowane przez wewnętrzną drukarkę termiczną.

Aparat URYXXON Relax oraz paski URYXXON Stick 10 posiadają certyfikat CE zgodny z Dyrektywą IVD 98/79/EG.

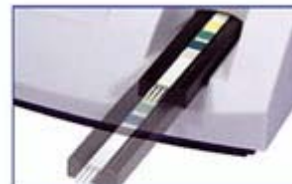

Bardzo uproszczona obsługa

Do rozpoczęcia badania wystarczy TYLKO ułożyć pasek na podajniku, pomiar rozpoczyna się automatycznie. Łatwo, wygodnie i higienicznie!

Ekran dotykowy

Nowoczesny ekran dotykowy czyni obsługę aparatu łatwą i przyjemną. Wszystkie funkcje są dostępne poprzez dotyk wyraźnie oznaczonych miejsc na ekranie. Zastosowanie dodatkowej klawiatury ułatwia ewidencję pacjentów.

Niekoniecznie w jednym miejscu

Wyjątkowo małe gabaryty aparatu w połączeniu z zasilaniem baterijnym czynią z niego doskonałą przenośną stację badań. Może być używany nawet przy łóżku pacjenta. Zajmuje mniej miejsca od kartki papieru formatu A4.

Pamięć dla 200 badań

Aparat zapamiętuje 200 wyników badań wraz z wprowadzonymi danymi pacjentów. Prosta funkcja wyróżniania patologicznych wyników umożliwia natychmiastowe ich odszukanie. Niebawala komfort i bezpieczeństwo!



Dane techniczne:

Wydajność: 60 badań/godz

Kalibracja: automatyczna (autokalibracja)

Pamięć: 200 wyników wraz z danymi pacjentów

Interfejs użytkownika: dotykowy wyświetlacz alfanumeryczny, dotykowa klawiatura, możliwość wprowadzenia hasła

Interfejs komputerowy: łącze USB oraz port równoległy RS232, gniazdo PS/2 do podłączenia czytnika kodów kreskowych i/lub dodatkowej klawiatury

Zasilanie: 110-220 V AC (auto) lub 6 sztuk baterii AA

Wyświetlacz graficzny

Wynik badania wyświetlany jest na ekranie LCD 128x128 pikseli co oznacza, że wszystkie pozycje są dostępne na jednej stronie. Przejrzyste flagowanie patologicznych wyników ułatwia kwalifikację badań.

Menu w języku polskim.

Bez kalibracji

Wbudowane pole referencyjne oraz nowoczesny układ optyczny zapewniają wyjątkową dokładność pomiarów. Aparat nie wymaga żadnych czynności kalibracyjnych w okresie użytkowania.

Niezależne zasilanie

Brak prądu nie ma znaczenia! Jeśli tylko będą zainstalowane powszechnie dostępne baterie AA, badanie można wykonać w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.



Wymiary/waga:

wysokość - 7,5 cm

szerokość - 16 cm

głębokość - 20 cm

waga - 710 g (bez baterii i zasilacza)

Warunki pracy:

temperatura otoczenia 5 - 40 stopni C

wilgotność względna otoczenia 20 - 80%



Diagnostyczne testy paskowe do badania moczu

Kat. Nr	Kat. Nr	Medi-Test typ testów	Pola testowe do oznaczania:														
			Glukoza	Ketony	Kwas askorbinowy	Białko	Krew	Leukocyty	Azotyny	Ciężar właściwy	pH	Bilirubina	Urobilinogen	Kreatynina	Grutarałdehyd	Utleniające	
930 01	930 24	Glucose ¹⁾	•														
930 03	930 26	Glucose 3 ¹⁾	•	•	•												
930 04	930 27	Protein 2 ¹⁾				•											
930 05	930 28	Keton ¹⁾		•													
930 06	930 29	Nitrit ¹⁾								•							
930 12	–	Urbi									•	•					
930 15	930 37	Combi 2 ¹⁾	•			•											
930 07	930 30	Combi 3 A ⁴⁾	•		•	•					•						
930 09	930 32	Combi 5 ⁴⁾	•		•	•	•				•						
930 35	930 36	Combi 5 N ⁴⁾	•		•	•	•			•	•						
930 55	–	Combi 5 S ¹⁾	•	•		•	•				•						
930 18	930 78	Combi 6 ⁴⁾	•			•	•	•	•				•				
930 13	930 34	Combi 6 A ⁴⁾	•	•	•	•	•	•			•	•					
930 10	930 22	Combi 7 ⁴⁾	•	•	•	•	•	•			•						
–	930 21	Combi 8 L ⁴⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
930 11	930 23	Combi 9 ⁴⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
–	930 56	Combi 10 ⁴⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
930 79	930 58	Combi 10 ⁴⁾ L ⁴⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
–	930 60	Combi 11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
930 77	930 67	Combi 10 ⁴⁾ SGL ⁴⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
–	930 68	URYXXON® Stick 10 ²⁾⁴⁾	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Testy paskowe do zastosowań weterynaryjnych																	
–	930 870	Combi 10 ⁴⁾ VET ³⁾⁴⁾	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Testy paskowe do wykrywania substancji fałszujących wynik badania moczu																	
930 19	–	Medi-Test Adulteration Stick ³⁾								•	•	•			•	•	•

Wszystkie produkty posiadają certyfikat CE zgodny z Dyrektywą 98/79/EC.

¹⁾ testy do badań manualnych ²⁾ testy do aparatów URYXXON ³⁾ produkt nie zaliczany do grupy IVD

⁴⁾ testy posiadają optymalne zabezpieczenie przeciwko zafałszowaniu wyniku przez chemiczne działanie witaminy C (kwasu askorbinowego)

Aparaty do odczytu testów paskowych Uryxxon Stick 10

930 88	Uryxxon Relax, półautomatyczny czytnik o wydajności 60 badań/godz
930 080	Uryxxon 500, czytnik o wydajności 400 badań/godz z ekranem dotykowym
930 69	Uryxxon 300, standardowy czytnik pasków

Wyposażenie opcjonalne i materiały eksploatacyjne

930 38	Medi-Test Control, zestaw próbek (NEG/POZ) do kontroli testów i aparatów Uryxxon
930 65	Papier do drukarki termicznej aparatu Uryxxon Relax, 5 rolek w opakowaniu
930 890	Nakładka podajnika pasków do aparatu Uryxxon Relax
930 891	Program do komputera PC dla aparatu Uryxxon Relax
930 71	Papier do drukarki termicznej aparatu Uryxxon 300 oraz Uryxxon 500, 5 rolek w opakowaniu
930 74	Czytnik kodów kreskowych do aparatów Uryxxon Relax, 300 i 500

Testy paskowe do ilościowego oznaczania glukozy we krwi (kapilara)

Testy do oznaczania glukozy we krwi

928 07	Testy paskowe Glycaemie C (dwukolorowe) do badania manualnego, 50 szt w opakowaniu ¹⁾
928 12	Testy paskowe Glycaemie V do badań manualnych, 50 szt w opakowaniu ¹⁾



Autoryzowany Dystrybutor
ELAB

Lipowa 9, Mysiadło, woj.mazowieckie
tel 022 7110947 fax 022 7014363
info@elabmed.pl www.elabmed.pl

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren

Germany and international
Tel +49 (0) 24 21 9690
Fax +49 (0) 24 21 969199
e-mail: info@mn-net.com

Switzerland
Tel +41 (0) 62 388 55 00
Fax +41 (0) 62 388 55 05
e-mail: sales-ch@mn-net.com

France
Tel +33 (0) 3 88 68 22 68
Fax +33 (0) 3 88 51 76 88
e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA
Tel +1 (0) 484 621 0964
Fax +1 (0) 484 621 1272
e-mail: sales-us@mn-net.com

